


How to use

3M™ Curoso™ Tips Disinfecting Cap Strip for Male Luers

Disinfects in 1 minute. Protects male luers for up to 7 days.



Peel Curoso Tips Disinfecting Cap from foil strip.

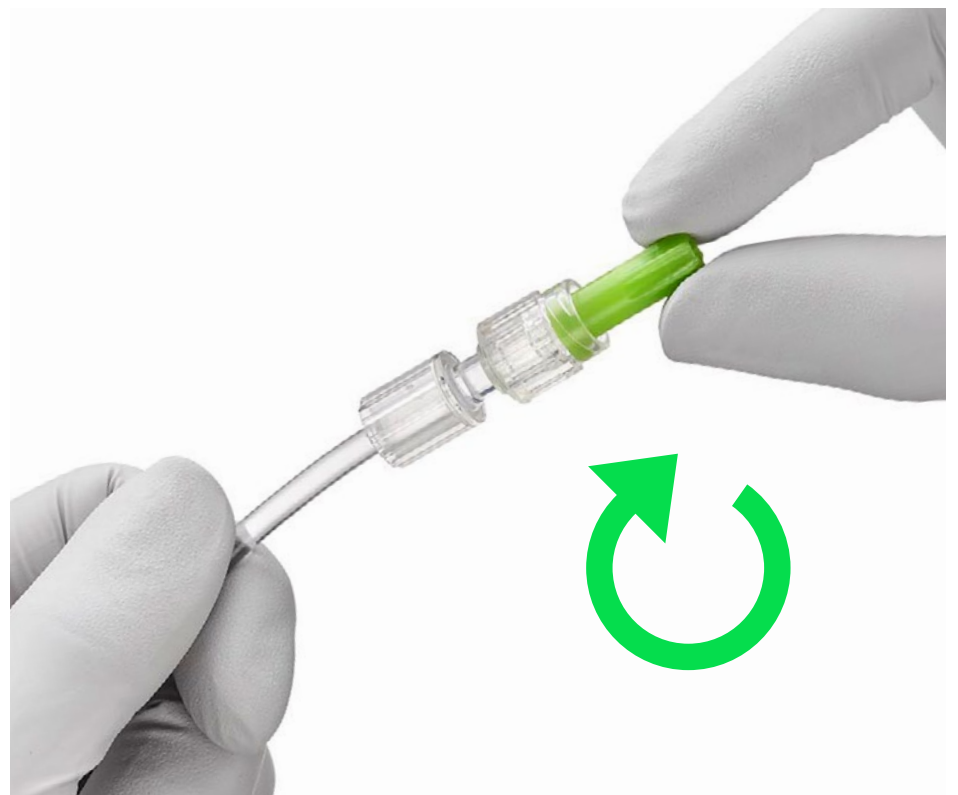

Push and twist the Curoso Tips Disinfecting Cap clockwise onto the end of the male luer.

Removal: The male luer connector can be accessed immediately after removing the Curoso Tips Disinfecting Cap that has been in place for a minimum of 1 minute.

- If male luer connection on I.V. line is heavily soiled, clean with 70% isopropyl alcohol swab before using Curoso Tips Disinfecting Cap
- Do not use if foil is broken, torn, punctured, or if Curoso Tips Disinfecting Cap appears dry inside
- Curoso Tips Disinfecting Cap must remain on male luer connection for a minimum of one (1) minute and may remain on for seven (7) days if not removed
- Always place a new Curoso Tips Disinfecting Cap on male luer connection after each use
- Dispose of the Curoso Tips Disinfecting Cap after every use; do not reuse. Reuse may result in cross-contamination and does not provide efficacy due to lack of alcohol present

Caution: Potential choking hazard

 Proven protection that's easy to see

STERILE | R

Available in Canada from:

3M Healthcare Canada Company Limited
75 Courtneypark Drive W., Unit #4
Mississauga, ON L5W 0E3
Canada

Phone 1-800-364-3577
Web solventum.com/en-ca

Active ingredient: 70% isopropyl alcohol (IPA). Single Use Only. This device is not made with natural rubber latex or plasticiser Diethylhexylphthalate (DEHP). Refer to current device labeling for indications for use, warnings and product details.

© Solventum 2026. Solventum and the S logo are trademarks of Solventum or its affiliates. 3M is a trademark of 3M. All other trademarks are owned by their respective owners.

1612-07291 B


Mode d'emploi

3M^{MC} Curos^{MC} Tips Bandelette de capuchons désinfectants pour raccords Luer mâles

Désinfecte en 1 minute. Protège les raccords Luer mâles jusqu'à 7 jours.



Peler le capuchon désinfectant Curos Tips de la bande en aluminium.

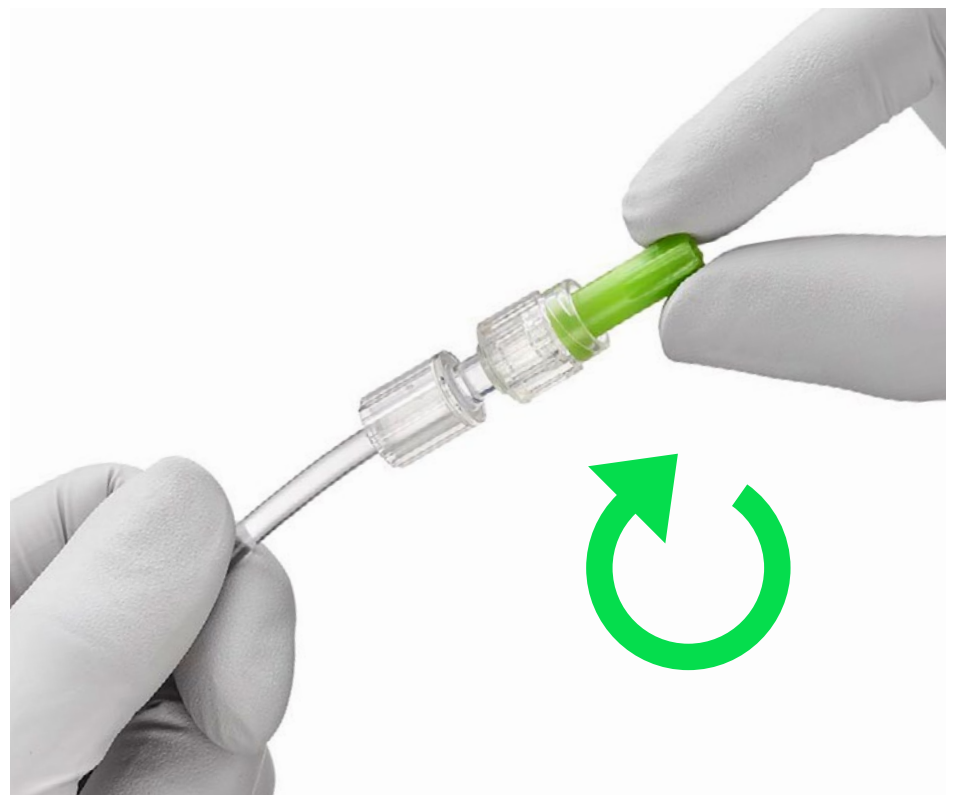

Pousser et visser le capuchon désinfectant Curos Tips dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'extrémité du raccord Luer mâle.

Retrait : On peut accéder au raccord Luer mâle immédiatement après avoir enlevé le capuchon désinfectant Curos Tips qu'on a laissé en place pendant au moins une minute.

- Si le raccord Luer mâle de l'intraveineuse est très souillé, le nettoyer avec un tampon imbibé d'alcool isopropylique à 70 % avant d'y installer le capuchon désinfectant Curos Tips
- Ne pas utiliser si la bande d'aluminium est brisée, déchirée ou percée, ou si le capuchon désinfectant Curos Tips semble sec à l'intérieur
- Les capuchons désinfectant Curos Tips doivent demeurer sur le raccord Luer mâle pendant au moins une (1) minute et peuvent y demeurer pendant sept (7) jours sans qu'on les retire
- Toujours placer un capuchon désinfectant Curos Tips sur les raccords Luer mâles après chaque utilisation
- Mettre les capuchons désinfectant Curos Tips au rebut après chaque utilisation; ne pas les réutiliser. La réutilisation risque de provoquer une contamination croisée et ne garantit pas l'efficacité à cause de l'absence d'alcool

Avertissement : Risque de suffocation potentiel

 Une protection éprouvée facile à voir

STERILE | **R**

Disponible au Canada chez :

3M Healthcare Canada Company Limited
75 Courtneypark Drive W., Unit #4
Mississauga, ON L5W 0E3
Canada

Phone 1-800-364-3577
Web solventum.com/fr-ca

Ingrédient actif : Alcool isopropylique à 70 %. Usage unique seulement.
Ce dispositif est exempt de latex de caoutchouc naturel ou de plastifiant diéthylhexylphthalate (DEHP). Consulter l'étiquetage courant du dispositif pour connaître les directives d'utilisation, les mises en garde et les détails sur le produit.

© Solventum 2026. Solventum et le logo S sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M est une marque de commerce de 3M. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

1612-07291 B