

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Scotchbond™ Universal Plus
Adeziv

**Orijinal ve artık
her zamankinden
daha iyi!**



Güvendiğiniz kriterlerde adeziv ...

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv, universal adezivleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Orijinal 3M™ Scotchbond™ Universal Adeziv'in tüm avantajlarına sahip olmayı sürdürürken daha fazla kontrol ve öngörülebilirlik sağlar – çünkü iyi bir adeziv, güçlü bir şekilde yapıştırmadan fazlasını sağlamalıdır.

Orijinalinden
5 adım
daha
ileride


-  **Fazladan radyoopasite**
-  **Çürükten etkilenen dentini yapıştırır ve mühürler**
-  **Cam seramikler dahil** dental ve restoratif substratlara gelişmiş bir şekilde yapışma
-  **İlave iki kat sertleştirme aktivatörü şişesi olmadan** tam iki kat sertleştirme ve kendiliğinden sertleşme kolaylığı
-  **BPA türevlerini içermez** BisGMA gibi



Universal olarak uygunluk

-  Doğrudan
-  Dolaylı
-  Tüm aşındırma teknikleri

Ayrıca, orijinal Scotchbond Universal Adeziv aşağıdaki popüler özelliklere sahiptir:

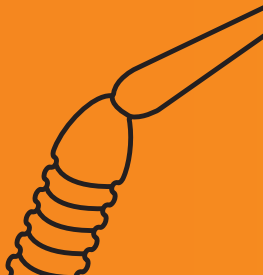

Artık yeni bir standart belirleniyor

Minimal İnvaziv Diş Hekimliği




Fazladan radyoopasite

Mevcut bir restorasyon altındaki radyolüsens, yanlış tanıya ve invaziv aşırı tedaviye yol açabilir. 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv, dentin benzeri radyoopasiteye sahip **ilk radyoopak universal adezivdir** ve bu sorunun üstesinden gelmesine yardımcı olur.

“ Bu şüpheli X-ışınları her gün meydana geliyor; diş röntgeninde en yaygın kritik adım, proximal box'ta sınıf II.”

– Prof. Dr. Angelo Putignano, Marche-Ancona Üniversitesi, İtalya

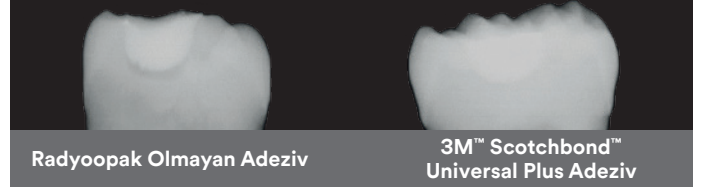

Intentional adhesive pooling under Class I restorations – X-rays of extracted human molars, filling material 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative. K. Dede ve diğerleri, J Dent Res 99 (Spec Iss A): 192 IADR, 2020 – 3M internal data, H. Loll ve diğerleri, J Dent Res 99 (Spec Iss A): No. 757, 2020


“ Restorasyon altında radyolüsens adeziv birikmesi, restorasyon replasmanı riskini iki katına çıkarır.”

– Dr. John O. Burgess, Alabama Üniversitesi, ABD


Diş yapısını korumak üzere çürükten etkilenen dentini yapıştırır ve mühürler

Scotchbond Universal Plus Adeziv, çürükten etkilenen dentine sağlam dentin ile aynı yüksek bağlanma gücüne sahip olduğundan, **minimal invaziv hazırlıklar gerçekleştirirken size güven** verir.

Restorasyon marjlarının mükemmel kalitesine ek olarak, iyi belirlenmiş, boşluksuz bir hibrit tabaka oluşturarak çürükten etkilenen dentini mühürler - çünkü ikincil çürümeyi önlemek için “mühürleme şarttır”.

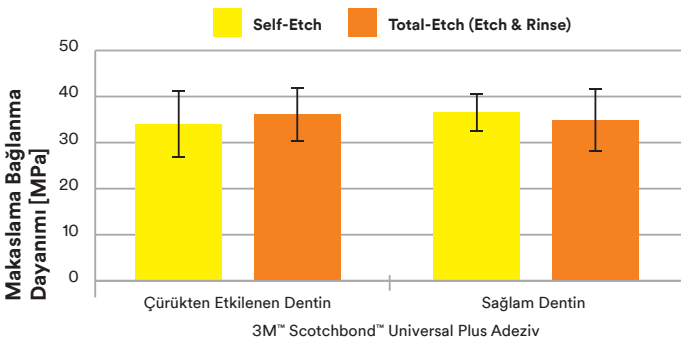

Shear bond strength on caries-affected and sound dentin – C. Thalacker ve diğerleri, Interaction of an Experimental Universal Adhesive with Caries-Affected Dentin, J Dent Res 99 (Spec Iss A): 191 IADR, 2020

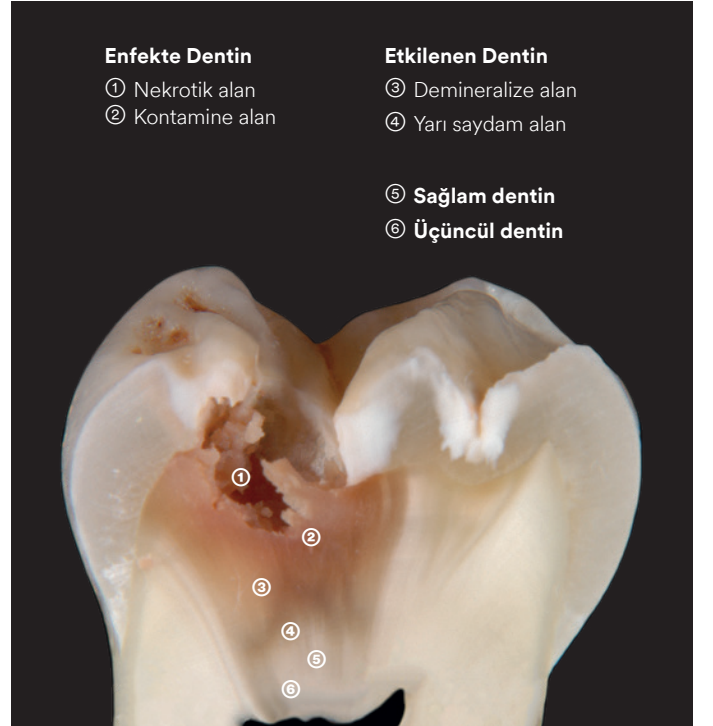

Çürük alanlar – Fotoğraf, Prof. Leandro Hilgert ve Prof. Soraya Leal Brezilya Üniversitesi (UnB), Brezilya izniyle kullanılmıştır

Ayrı bir primer ihtiyacı olmadan

tüm restoratif malzemeleri yapıştırır

Operasyon sonrası hassasiyet neredeyse yoktur


99%

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv in ameliyat sonrası neredeyse hiç hassasiyet meydana getirmediğini bildiren diş hekimlerinin oranı*

* 309 diş hekimi ve 20.000'den fazla uygulama ile alan değerlendirilmesi

Cam seramiğe gelişmiş yapışma

Scotchbond Universal Plus Adeziv, geleneksel, ayrı silanların altın standardı düzeyine ulaşır.

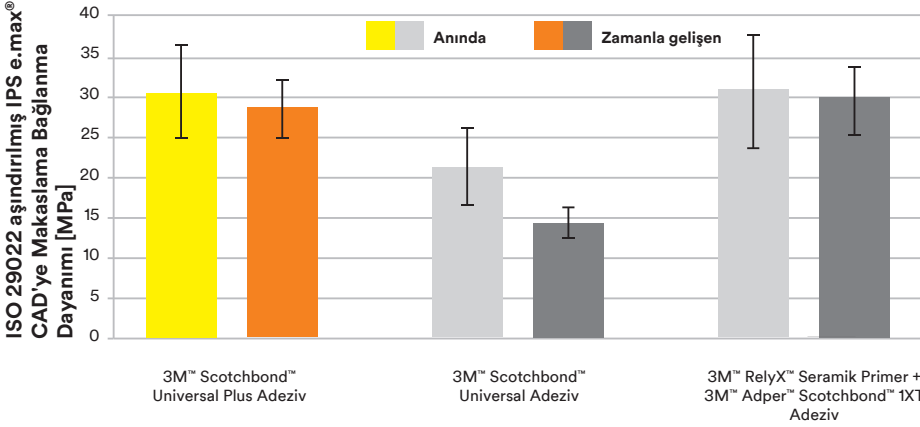

Shear bond strength on glass ceramic – Prof. Dr. Bart van Meerbeek et al., KU Leuven, Belgium, Report to 3M, 2020

Rapor sonucu:

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv, cam seramiğin (IPS e.max® CAD, Ivoclar Vivadent) yapıştırılması için 3M™ Scotchbond™ Universal Adeziv'den daha iyi performans göstermiştir. Cam seramiğin HF asit ile aşındırılmasından sonra, olumlu bir “anında” ve “zamanla gelişen” makaslama bağlanma dayanımı kaydedilmiştir.

3M™ RelyX™ Universal Rezin Siman ile tamamen uyumlu sistem

Hemen hemen tüm iki kat sertleşen rezin siman endikasyonları için mükemmel bağlanma gücü. Basitleştirilmiş uygulamalar – RelyX Universal Rezin Siman ile sertleştirilen adeziv.



Sipariş Bilgisi

Ürün no. Ürün bilgisi

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv – Şişe

41293	Uygulama Kiti Şişesi 5 ml'lik 1 Şişe, 50 Tek kullanımlık fırça, 3 ml'lik 1 Aşındırıcı Şiringası, 25 Dağıtım Ucu
41294	Yedek Şişe – 1 x 5 ml
41295	Yedek Şişe – 3 x 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Aşındırıcı Aşındırma Jeli 2 Şiringa x 3ml, 50 Dağıtım Ucu

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adeziv – Birim Dozu

41297	Uygulama Kiti Birim Dozu 50 Birim Dozu, 3 ml'lik 1 Aşındırıcı Şiringası, 25 Dağıtım Ucu
41298	100 Birim Dozu 100 Birim Dozu, 3 ml'lik 1 Aşındırıcı Şiringası, 25 Dağıtım Ucu
41299	200 Birim Dozu 200 Birim Dozu, 3 ml'lik 1 Aşındırıcı Şiringası, 25 Dağıtım Ucu
41304	400 Birim Dozu 400 Birim Dozu, 3 ml'lik 1 Aşındırıcı Şiringası, 25 Dağıtım Ucu



Şişe

Pürüzsüz ve düz yüzeyli – fazla malzemenin silinmesi kolaydır



Birim Dozu

Verimli hijyen yönetimi için – çapraz kontaminasyon riskini azaltır



3M Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Çözümleri

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye
www.3M.com.tr

3M.com

3M, Filtek, RelyX ve Scotchbond, 3M Company veya 3M Deutschland GmbH'nin ticari markalarıdır.
© 3M 2022. Tüm hakları saklıdır. OMG205626