



Tegaderm™

IV Care Solutions

Produktguide


Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetre*

3M™ Tegaderm™ Antimicrobial Advanced I.V. forbinding 9132

Integreret design kombineret af antimikrobiel beskyttelse, synlig inspektion af indstikssted, kateterfastgørelse og vedvarende applicering til perifere I.V. adgange.

Antimikrobiel beskyttelse

Reducerer væksten af normal hudflora på klargjort hud bedre end ikke anti-mikrobielle forbindinger.¹

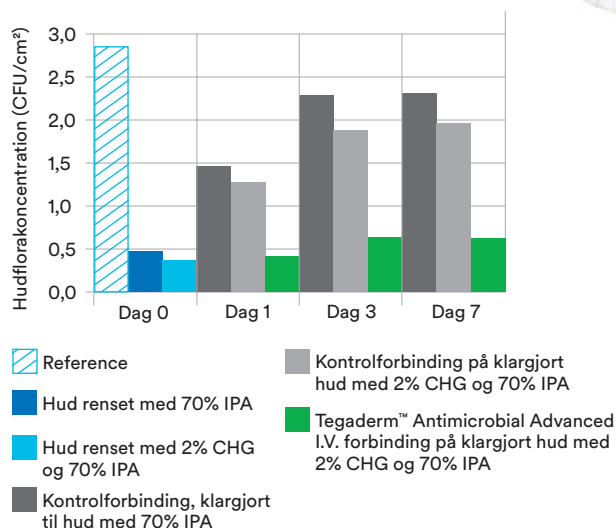

En vandtæt, steril barriere beskytter mod udefrakommende kontaminanter**

Åndbar, transparent film.

Antimikrobiel beskyttelse

Klorhexidin-glukonat (CHG) er designet ind i forbindingsklæbestoffet for at give antimikrobiel beskyttelse. Der kræves ingen yderligere fugt for aktivering.

Stor fikseringsstrip med nøglehulsudformning.

Fremmer sikker fiksering og forbedrer stabiliseringen.

Stabiliseringskant

Bruger teknologi, der er designet til at reducere kantrulning.

Tilpassende nøglehulsudskæring

Nøglehullet tillader kateterlumen optimal pasform og tætsluttende fiksering.

Antimikrobiel beskyttelse

Har vist at kunne reducere væksten af normal hudflora på klargjort hud i op til 7 dage.

Synlighed af indstikssted

Transparent forbinding, der giver mulighed for tidlig opsporing af komplikationer ved indstiksstedet.

Kateterfiksering

Designet til at minimere kateterbevægelse og kateterdeslokation.

Brugervenlig


Forbindingen med CHG-klæbestof er designet til at sikre standardiseret, korrekt anvendelse.

*Kompatibel med de perifere IV-systemer, der normalt bruges med Velano Vascular™ PIVO™-blodtagningsproceduren, herunder Velano ExT™-stabiliseringsanordningen.

**In vitro-testning viser, at filmen danner en barriere mod vira, der er 27 nm i diameter eller større, mens forbindingen forbliver intakt uden lækage.

1. 3M-arkivdata. EM-05-305455

9132

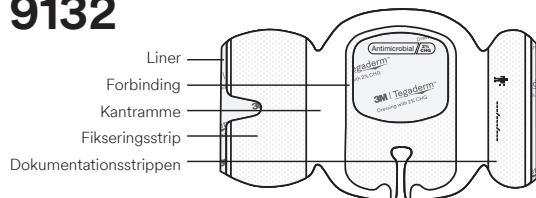

Produktguide

Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetre*

Klargør




Klargør indstiksområdet i henhold til retningslinjerne på afdelingen. Sørg for at indstiksområdet er helt tørt.

Tryk



Forbindingen må ikke strækkes, når den påsættes. Træk lineren af forbindingen, og placer forbindingsvinduet over indstiksstedet, samtidigt med at kateteret justeres med nøglehulsudskæringen. Påfør tryk på hele forbindingen med én hånd for optimal klæbeevne, samtidigt med at rammesystemet fjernes med modsatte hånd.

Beskyt

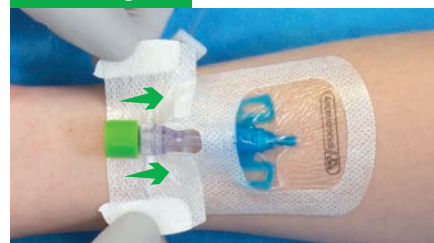

Påfør fikseringsstrippen under kateterudgangen, og overlap tilbage på forbindingen. Fjern de klæbefrie tapper.

Beskyt



Dokumentér information om skift af forbinding på etiketstrippen. Fastgør etiketstrippen ovenpå forbindingen, over kateterlumen(er). Fjern de klæbefrie tapper. Fastgør rør med tape.

Overvåg



Skift forbindingen:

- ▶ Mindst hver 7. dag
- ▶ Hvis forbindingen sidder løst, er synlig uren eller fugtig
- ▶ I henhold til retningslinjerne på afdelingen

Fjernelse



Fjern tapestrimler. Brug en stille og rolig seponeringsteknik, og start med at fjerne forbindingen fra der, hvor kateteret eller kateterslangen kommer ud og træk mod indstiksstedet. Undgå hudtraume ved at trække forbindingen bagud i stedet for at trække den op fra huden.

Se produktets brugsanvisning for andre vigtige oplysninger.

Bestillingsoplysninger

Produkt	Produktnummer	Størrelse	Forbindinger/æske	Æsker/kasse
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4

Besøg [3M.com/IVtraining](https://www.3m.com/IVtraining) for at finde produkttræningsressourcer for alle 3M I.V.-behandlingsløsninger.

3M a/s
Medical Solutions Division
Hannemanns Allé
53 DK-2300 København
3MHealthCare.DK@mmm.com
+45 43 48 01 00
www.3mhealthcare.dk

3M og Tegaderm er varemærker tilhørende 3M Company. © 3M 2020. Alle rettigheder forbeholdes. OMG119878

