



Tegaderm™

IV Care Solutions

Produktguide


Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetrar*

3M™ Tegaderm Advanced 9132™ antibakteriellt intravenöst fixeringsförband

Integrerad design kombinerar antibakteriellt skydd med transparens, kateterfixering och konsekvent applicering för perifera intravenösa katetrar.

Antibakteriellt skydd

Motverkar tillväxt hos den normala hudfloran på desinfekterad hud bättre än förband som inte är antibakteriella.¹

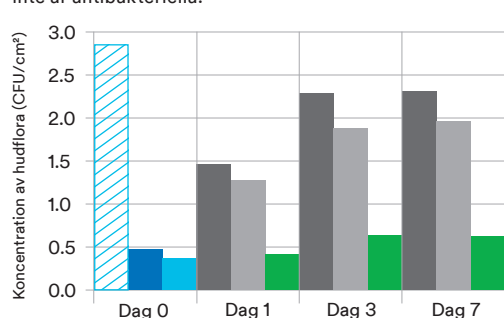

Baslinje

Efter 70 % IPA

Efter 2 % CHG i 70 % IPA

Kontrollförband, hud preparerad med 70 % IPA

Kontrollförband, hud preparerad med 2 % CHG i 70 % IPA

Tegaderm Advanced™ antibakteriellt intravenöst fixeringsförband, hud preparerad med 2 % CHG i 70 % IPA

En vattentät och steril barriär skyddar mot yttre föroreningar**

Transparent film som andas.

Antibakteriellt skydd

Klorhexidylglukonat (CHG) är integrerat i förbandets fästytta för att ge antibakteriellt skydd. Ingen extra fukt krävs för att aktivera.

Bred fixerings-tejpremsa med slits

Främjar konsekvent applicering och förbättrar stabiliseringen.

Anpassningsbar nyckelhålsslits

En slits gör att katetern sitter bättre och hålls på plats.

Formbar kant

Använder teknik framtagen för att minska risken att kanterna släpper.

Antibakteriellt skydd

Motverkar bevisat tillväxt hos den normala hudfloran på preparerad hud i upp till 7 dagar.

Transparens

Transparent förband som gör det enklare att tidigt upptäcka komplikationer vid insticksstället.

Kateterfixering

Avsedd att minimera rörelser och dislokation av katetern.

Enkel användning


Förbandet med CHG-fästytta är utformat för att säkerställa standardiserad och korrekt applicering.

*Kompatibel med perifera intravenösa system som används med Velano Vascular™ PIVO™ blodprovspåsar, inklusive Velano ExT™ stabiliseringsenhet.

**In vitro-tester visar att den transparenta filmen utgör en barriär mot virus som är 27 nm eller större, så länge förbandet är helt och inte läcker.

1. 3M data på fil. EM-05-305455

9132

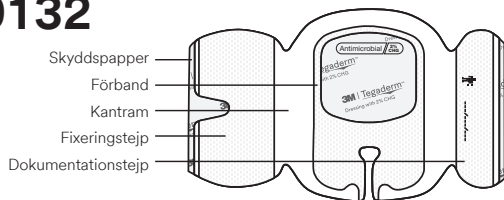

Produktguide

Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetrar*

Förbered



Förbered huden enligt gällande rutiner. Se till att huden är helt torr.


Applicering



Applicering med en hand

Sträck inte förbandet vid appliceringen. Ta bort skyddspappret från förbandet, placera förbandsfönstret över insticksstället och rikta in infusionsslangen mot slitsen. Tryck runt förbandets kant med en hand för optimal vidhäftning samtidigt som du tar bort skyddspappret med den andra handen.

Säkra

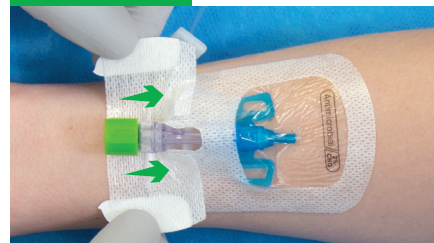

Applicera fixeringstejpen under injektionsventilen och överlappande tillbaka på förbandet. Ta bort de häftämnesfria flikarna.

Säkra



Notera informationen om förbandsbyte på dokumentationstejpen. Applicera dokumentationstejpen ovanpå förbandet, över kateterkanalerna. Ta bort de häftämnesfria flikarna. Fäst slangen med tejp.

Övervaka



Byt förbandet:

- ▶ Minst en gång i veckan
- ▶ Om förbandet börjar sitta löst eller blir smutsigt eller fuktigt
- ▶ Enligt gällande rutiner

Ta bort



Ta bort tejprensorna. Använd en låg och långsam borttagningsteknik och börja ta bort förbandet där katetern eller slangen går ut från förbandet i riktning mot kateters insticksställe. Undvik hudskador genom att rulla förbandet lågt mot huden, istället för att dra det rakt uppåt.

Se produktens bruksanvisning för övrig viktig information.

Beställningsinformation

Produkt	Artikelnummer	Förbandets totala storlek	Antal/förpackning	Förpackning/Transportförpackning
	9132	7 cm × 8,5 cm	25	4

Gå till 3M.com/IVtraining för produktutbildning inom alla 3M:s lösningar för intravenösa infarter.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
3MHealthCare.SE@mmm.com
08-922100
www.3m.se/msd

3M och Tegaderm är varumärken som tillhör 3M Company. © 3M 2021. Med ensamrätt. OMG119878

