



Tegaderm™

IV Care Solutions

Produktveiledning


Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetre*

3M™ Tegaderm™ Antimikrobiell I.V. Advanced fikseringsban- dasje 9132

Det integrerte designet kombinerer antimikrobiell beskyttelse med oversikt over innstikkstedet, kateterfiksering og konsekvent påføring for perifere I.V-er.

Antimikrobiell beskyttelse

Bedre undertrykkelse av tilbakevekst av normal hudflora på klargjort hud enn hos ikke-antimikrobielle bandasjer.¹

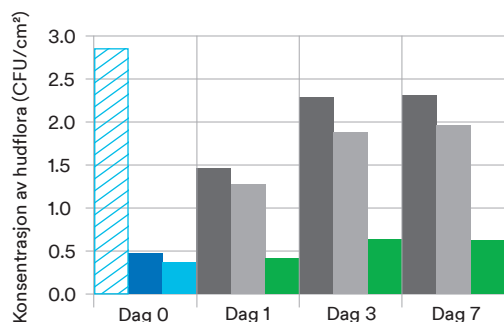

■ Grunnlinje
■ Etter 70 % IPA
■ Etter 2 % CHG i 70 % IPA
■ Kontrollbandasje, huden klargjort med 70 % IPA
■ Tegaderm™ Antimikrobiell I.V. Advanced fikseringsbandasje, huden klargjort med 2 % CHG i 70 % IPA

Den vanntette, sterile beskyttende barrieren beskytter mot ekstern forurensning**

Pustende, transparent folie.

Antimikrobiell beskyttelse

Den klebende bandasjen er utformet med klorheksidinglukonat (CHG) som sørger for antimikrobiell beskyttelse. Det er ikke nødvendig med ekstra fukt for å aktivere.

Stor strimmel med fikseringstape med splitt

Fremmer konsekvent påføring og forbedrer stabiliteten.

Formbart nøkkehullsformet splitt

Splitten sørger for at kateterlumen passer bedre og holder seg på plass.

Formbar kantgrense

Braker teknologi for å redusere kantløfting.

Antimikrobiell beskyttelse

Bevist at den opprettholder undertrykkelsen av tilbakevekst av normal hudflora på klargjort hud i opptil 7 dager.

Innsyn til innstikkstedet

Gjennomsiktig bandasje muliggjør tidlig identifisering av komplikasjoner ved innstikkstedet.

Kateter fiksering


Bruker vennlighet

Bandasjen med CHG-lim er utformet for å sikre standardisert, korrekt påføring.

*Kompatibel med perifere I.V-systemer som ofte brukes med blodprøvetakingsprosedyren Velano Vascular™ PIVO™, inkludert Velano ExT™ Stabilization Device.
**In-vitro testing viser at folien gir en barriere mot virus som har en diameter på 27 nm eller større, mens bandasjen forblir intakt uten lekkasjer.

1. Arkiverte 3M-data. EM-05-305455

9132

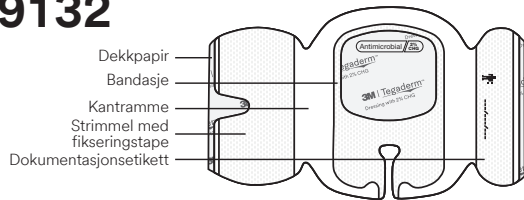

Produktveiledning

Kompatibel med B-Braun™
Introcan 3-katetre*

Klargjør



Klargjør stedet i henhold til institusjonens protokoll. Sørg for at overflaten er helt tørr.


Trykk



Påføring med én hånd

Ikke strekk bandasjen ved plassering. Trekk av dekkpapiret fra bandasjen og plasser bandasjevinduet over innstikkstedet, slik at du justerer forlengesslangene etter fikseringssplitten. Legg fast trykk på hele bandasjen med én hånd, for optimalt feste, samtidig som du fjerner kantrammen med motsatt hånd.

Fest

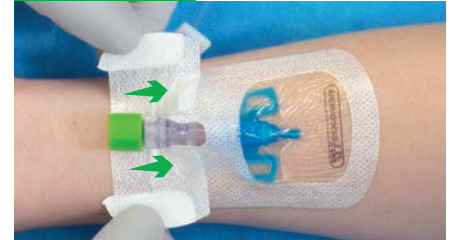

Fest fikseringsstripsen under blodtakingshuben og over bandasjen. Fjern flikene uten lim.

Fest



Dokumenter bandasjeskiftinformasjonen på merkestrimmelen. Påfør merkestrimmelen over bandasjen, oppå kateterlumenet eller -lumenene. Fjern flikene uten lim. Fest slangene med tape.


Overvåk



Bandasjeskift:

- Minst hver 7. dag
- Hvis bandasjen løsner, blir tilsmusset eller fuktig
- I henhold til institusjonens protokoll

Fjerning

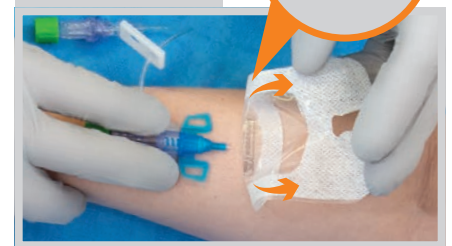

Fjern tapestrimler. Bruk en "low and slow" fjerningsteknikk, og begynn med å fjerne bandasjen fra der kateteret eller slangene kommer ut av bandasjen, mot kateterets innstikksted. Unngå hudskader ved å dra bandasjen bakover i stedet for å dra den oppover fra huden.

Se produktets bruksanvisning for annen viktig informasjon.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Produktnummer	Total bandasjestørrelse	Bandasjer/eske	Esker/kartong
	9132	7 cm x 8,5 cm	25	4

Besøk [3M.com/IVtraining](https://www.3m.com/IVtraining) for å finne produktopplæringsressurser for alle 3M IV Care-løsninger.

3M Norge AS
Tærdugata 16
2001 Lillestrøm
Telefon 1-800-228-3957
Internett3mnorge.no

3M og Tegaderm er varemerker tilhørende 3M Company. © 3M 2021. Med enerett. OMG119878

