

3M™ Curoos™ Stopper

Desinfeksjonspropp for åpne Female Luer-koblinger

**Desinfiserer på 1 minutt – beskytter åpne female luer-koblinger
i opptil 7 dager**



Dra av




Trykk og vri den på kateterhuben


- ▶ Verifiser at stoppekranventilen eller kateterklemmene er lukket før du bruker 3M™ Curoos™ Desinfeksjonspropper for åpne Female Luer-koblinger
- ▶ Hvis den åpne female luer-koblingen er synlig tilsmusset, må du rengjøre den med 70 % isopropylalkohol før du bruker hetten
- ▶ Ikke bruk proppen hvis forseglingen er brutt, revet opp eller punktert
- ▶ Løsne proppen fra folien
- ▶ Dytt og vri enheten med klokkevisningen på enden av den åpne female luer-koblingen til den er stramt tilkoblet, etter fjerning av folien
- ▶ Proppen må sitte på i minimum 1 minutt, og kan forbli på i syv dager hvis den ikke fjernes
- ▶ Du kan umiddelbart få tilgang til den åpne female luer-koblingen etter fjerning av Curoos Stopper desinfeksjonsproppen som har sittet på i minst 1 minutt
- ▶ Kast proppen etter hver bruk, og ikke bruk proppen om igjen
- ▶ Den nye proppen skal plasseres på åpne female luer-koblinger etter hver bruk
- ▶ Ved påfølgende tilganger, følg sykehusets prosedyre for desinfisering av åpne female luer-koblinger

Advarsel: bruk kun åpne female luer og sikre at proppen er strammet godt for å unngå potensiell skade.

Forsiktig: potensiell kvelningsfare.

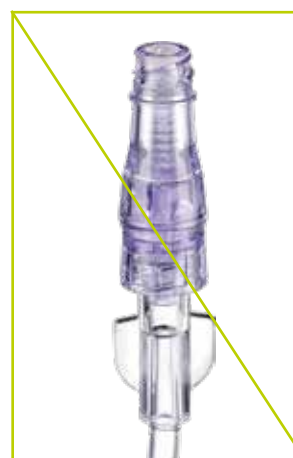

**Skal ikke
brukes
på nåleløse
koblinger**

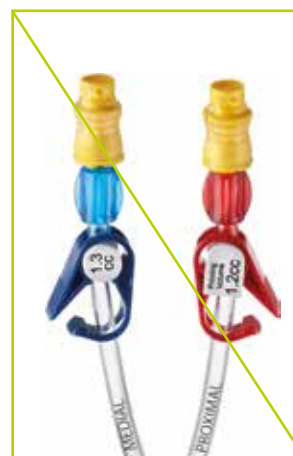

**Skal ikke
brukes
på Tego®
Hemodialyse
koblinger**