




Filtre à air

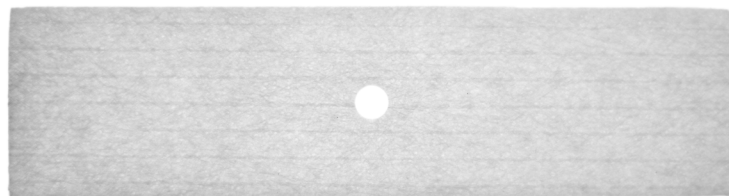


À utiliser avec les solutions Incubateur Giraffe™ Carestation et Omnibed Giraffe™ Carestation.

Maintenir le flux d'air de la couveuse tout en garantissant une filtration efficace

Fonctionnalités

- Installation simple
- Bidirectionnel, peut être installé dans n'importe quel sens
- Étiquette vierge pour noter la date d'installation et suivre le cycle de remplacement

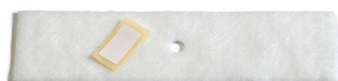

Filtre à air, bidirectionnel

**Notre équipement.
Nos accessoires.
La compatibilité, tout simplement.**

Fiables et performants, les accessoires et consommables GE Healthcare sont conçus pour garantir le fonctionnement optimal de vos appareils.

- Processus de commande simplifié
- Livraison rapide
- Un interlocuteur unique pour des conseils d'expert
- Qualité de l'assistance technique garantie à chaque étape

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	Informations sur la pièce
Microfiltre	0,3 µ – 99,8 % d'efficacité à un débit de 1 cm/s
Performance du système	Niveau de CO ₂ ≤ 0,3 %
Poids	120 à 180 g/m ²
Dimensions	Approximativement 14,17 cm x 3,63 cm x 0,2 cm (L x l x E)

Matériaux

Fibres synthétiques électrostatiques non tissées

Fibres 100 % synthétiques

Non tissé, par filage direct, en polypropylène

Utilisation du produit

Le filtre à air doit être remplacé tous les 3 mois. En outre, il doit être remplacé après utilisation du lit par un patient infecté et dès qu'il semble sale.

Noter la date du dernier remplacement sur l'étiquette du filtre et inspecter le filtre à chaque nettoyage.

Environnement de fonctionnement

Température :	20 °C à 30 °C (68 °F à 86 °F)
Humidité :	≤ 85 % d'HR (sans condensation)
Pression :	50 à 106 kPa

Stockage

Température :	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité :	≤ 85 % d'HR (sans condensation)
Pression :	50 à 106 kPa

Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions du monde. Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations. Visitez notre site Internet <http://www.gehealthcare.com/>

Imagination at work

Mise au rebut

Les filtres à air doivent être mis au rebut en tant que déchets médicaux, conformément à la politique de l'hôpital et aux directives et réglementations locales.

Matériaux d'emballage

Principal : Sachet en polyéthylène (PE)

Conformité

Il ne s'agit pas d'un dispositif médical.


Normes

Filtre à air conforme à la norme REACH (EC)/1907/2006.

Filtre à air conforme à la directive ROHS 2011/65/EU (réf. : conforme à la norme ROHS GEHC selon 5240305GSP).

LISTE DES PIÈCES

Référence	Description	Quantité
2107356-001	Filtre à air, bidirectionnel	10

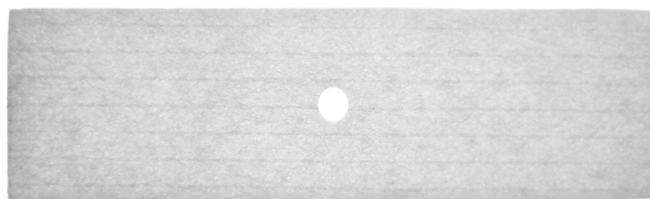

© 2020 General Electric Company – Tous droits réservés.

GE Healthcare se réserve le droit de modifier les spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit, à tout moment, sans préavis ni obligation. Contactez votre représentant GE Healthcare pour obtenir les informations les plus récentes. GE et le monogramme GE sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Healthcare, une division de General Electric Company. BiliSoft, BiliBlanket et Giraffe sont des marques commerciales de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., commercialisant ses produits sous le nom de GE Healthcare. Tous les autres noms de produits et les logos sont des marques commerciales ou déposées des sociétés auxquelles ils sont associés.

JB80111XE