



Indicador químico trimétrico Attest™ de 3M™ para peróxido de hidrógeno vaporizado 1348/1348E

Monitoree tres variables clave mediante una innovación simple.

El primer IQ para VH2O2 para monitorear de manera independiente las tres variables: tiempo, temperatura y concentración de VH2O2.

Por primera vez, con el monitoreo mediante VH2O2 se puede obtener un nivel de seguridad superior al que se espera actualmente con el monitoreo mediante vapor. El innovador Indicador químico trimétrico de tipo 4 Attest™ de 3M™ agiliza su flujo de trabajo ya que muestra resultados de esterilización claros para instrumentos sensibles al calor y a la humedad.



Detecta ciclos de esterilización por VH2O2 fallidos con más precisión que cualquier otro IQ evaluado.*¹



Es fácil leer las zonas “aceptado” (accept) y “rechazado” (reject). Cambia claramente de azul a rosa.²



El color más estable de todos los IQ para VH2O2 evaluados*: no cambia de color antes de la esterilización con la luz natural.³



La lámina protectora patentada evita que los instrumentos quirúrgicos se manchen con tinta.⁴



Somos líderes en mejorar la atención del paciente

El primer IQ autorizado por la FDA para la esterilización por VH2O2, categorizado por la FDA como un IQ multivariable para la esterilización química por vapor que monitoriza independientemente tres variables críticas.⁵


- tiempo
- temperatura
- concentración de VH2O2

*IQ para VH2O2 de tipo 1 y de tipo 4 del mercado

Ofrecemos un nivel más alto de rendimiento.

La esterilización por VH₂O₂ está diseñada para utilizarse a temperaturas más bajas para procesar instrumentos y dispositivos sensibles al calor y la humedad. Con el indicador químico trimétrico de tipo 4 Attest™ de 3M™ para VH₂O₂, se obtienen resultados de monitoreo de esterilización en los que se puede confiar.

- Fácil de encontrar entre los instrumentos de un paquete.
- Resultados claros a simple vista. La tecnología frontal elimina el tiempo dedicado a interpretar los cambios de color.
- El código de barras 2D contiene el número de lote y la fecha de caducidad para escanearlos con el sistema actual de seguimiento de instrumentos de su hospital.
- El cambio de color de azul a rosado es común a todos los indicadores químicos 3M para peróxido de hidrógeno vaporizado.

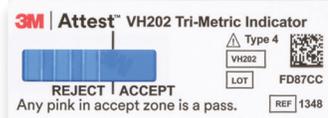

Sin procesar



Procesado: rechazado



Procesado: aceptado



Dorso

El indicador químico trimétrico Attest™ de 3M™ para peróxido de hidrógeno vaporizado 1348/1348E es un IQ de tipo 4, según la definición de la norma ISO 11140-1:2014 con los siguientes valores establecidos.

| Indicador químico Attest™ de 3M™ | Valores establecidos |
|----------------------------------|----------------------|
| VH ₂ O ₂ | 5,1 mg/l |
| Tiempo de exposición | 1 minuto |
| Temperatura | 50 °C |



Información para pedidos

| Producto | Nombre del producto | Longitud | Artículos/bolsa | Por caja |
|----------|---|---------------------------------|-----------------|-----------|
| 1348 | Indicador químico trimétrico Attest™ de 3M™ para peróxido de hidrógeno vaporizado | 5,08 cm (2 pulgadas) | 250 | 4 bolsas |
| 1348E | Indicador químico trimétrico Attest™ de 3M™ para peróxido de hidrógeno vaporizado | 10,16 cm (4 pulgadas) | 250 | 4 bolsas |
| 1295 | Indicador biológico de lectura rápida Attest™ de 3M™ (tapa rosa) | – | 30 | 4 bolsas |
| 1228 | Cinta indicadora Comply™ de 3M™ para peróxido de hidrógeno | rollo de 1,9 cm (0,75 pulgadas) | – | 24 rollos |

Para obtener más información o para solicitar una muestra, comuníquese con su representante de ventas local en Latinoamérica.



3M Company
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 EE. UU.

Teléfono 1-800-228-3957
Página web 3M.com/medical

¹EM-05-692856, EM-05-692858
²EM-05-424823
³EM-05-692861
⁴EM-05-638321
⁵EM-05-673143

© 2021 3M. Todos los derechos reservados. 3M y las otras marcas que se muestran son marcas o marcas registradas. Queda prohibido su uso no autorizado. Recicle. EN_GL_70-2011-7989-5